

E-PEX*



LOCALISATEUR D'APEX


INTELLIGENT, PRÉCIS & FIABLE



Démarrage et arrêt automatique



Inverse apical

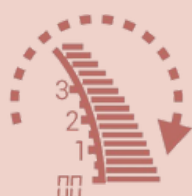

Ralentissement apical

250€**



*E-Pex est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Changzou Sifary Medical Technology Co., Ltd. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires Pred.





** Tarif TTC

LOCALISATEUR D'APEX INTELLIGENT, PRÉCIS ET FIABLE



- Technologie multi-fréquence avancée
- Haute précision dans les canaux humides et secs
- Grand écran LCD 3,5"
- Calibrage automatique
- Taille compacte et design stable

AFFICHAGE À L'ÉCRAN ET SA SIGNIFICATION

	Interface	Interface	Interface	Interface
Écran				
Value	1 2	0 9	0 0	- 3
Signification	La valeur d'échelle est 2, indiquant que la distance de l'apex est d'environ 2 mm	Il indique que la distance de l'apex est d'environ 1,5 mm	Il indique que la lime endo atteint l'apex	Il indique que la lime canalaire a dépassé l'apex
Alarme	L'alarme retentit pendant un long intervalle de temps	L'intervalle du son de l'alarme devient plus court	Bip long ininterrompu	Son d'alarme très rapide